



Oasis Series

Y8y8c

CAMA ELÉTRICA MULTIFUNCIONAL

Código de registro: SKD-C

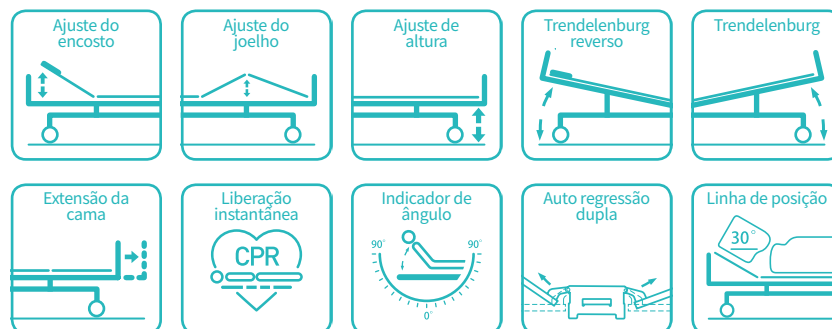


SAIKANG Medical

Sua vida mais
saudável

Y8y8c

RECURSOS E DESTAQUES



Parâmetros técnicos

▪ Tamanho externo (CxL):	2130x1050 mm
▪ Plataforma do colchão:	1925x880 mm
▪ Carga de trabalho segura:	250 kg
▪ Ajuste de altura:	350-800 mm
▪ Ajuste do encosto:	0-75° (±10°)
▪ Ajuste do joelho:	0-35° (±10°)
▪ Trendelenburg reverso	0-16°
▪ Trendelenburg:	0-16°
▪ Indicador de ângulo:	0-90°
▪ Auto-regressão:	100+60 mm
▪ Linha de posição:	30°
▪ Tensão e frequência:	100-240 V · 50/60 Hz
▪ Conecte conforme necessário (grau hospitalar)	

Vantagens

- ★ Auto-regressão dupla
- ★ Posição super baixa da cama 350 mm
- ★ Plataforma de cama PP, removível e lavável
- ★ Placa do pé e da cabeça pp do tipo inserido, liberação de uma etapa com trava de segurança, design patenteado
- ★ Proteção de segurança PP com sistema de destravamento de duas etapas, design patenteado
- ★ Encosto posição de 30 graus, reduz a chance de infecção pulmonar
- ★ Luz noturna embutida

Configuração técnica

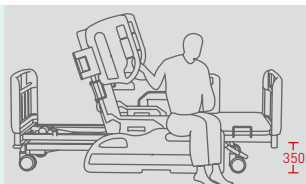
☒ Motor linear	4 peças
☒ Rodas de 5" de laterais duplas, sistema de travamento central	4 peças
☒ Altura extra da grade lateral ABS Oasis	1 conjunto
☒ Cama ABS Oasis com fechadura de segurança	1 conjunto
☒ Plataforma de cama PP, removível e lavável	9 unidades
☒ Tomada de plástico dentro de proteção pp para telefone ou óculos	2 unidades
☒ Indicador de ângulo de patente para encosto e posição de Trendelenburg	4 unidades
☒ Roda protetora de parede Ø70mm	4 pcs
☒ Suporte para soro	1 conjunto
☒ Previsão de suporte para soro	4 pcs
☒ Gancho de drenagem	2 pcs
☒ Pedal de travamento central	2 pcs
☒ Rolha de colchão ABS	2 peças
☒ Controlador de mão	1 pc
☒ Elétrico RCP	
☒ RCP manual	

Opcional

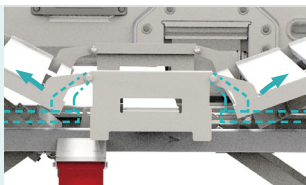
☐ Sistema de pesagem
☐ Extensão da cama de 20 cm
☐ Bateria de reserva
☐ Pannel de controle da enfermeira
☐ Botão de parada de emergência
☐ Posição da cadeira cardíaca
☐ Função das rodas direcionais
☐ 5° e 6° trilhos laterais extras para proteção total
☐ Macaco pólo
☐ Quadro dos Balcões
☐ Porta-roupa

Multi-cuidado elevado

Respeita a fácil mobilização do paciente: Um botão para a mobilização do paciente, posição - placa traseira elevada, design de orifício duplo na proteção da parte traseira, que apóia o paciente em pé.

**Função de regressão dupla**

Auto-regressão 10 + 6 cm ao reposicionar o encosto e o apoio da coxa, o Y8y faz o encosto recuar 10 cm e o encosto 6 cm de forma a minimizar a pressão na região pélvica do paciente. Isso resulta em uma redução significativa na o desenvolvimento de úlceras de pressão.

**Segurança**

Padrão de segurança IEC 60601. Um botão de paragem com interruptor de emergência que pode parar rapidamente todo o movimento.

**Trilho de segurança**

O guarda-corpo projetado foi totalmente considerado para fornecer espaço e prensão de mão suficientes para o paciente sair da cama e fornecer segurança extremamente alta. Sistema de desbloqueio de duas etapas, para evitar que os pacientes abaiquem acidentalmente a grade de proteção (design patenteado).

**Motor elétrico**

Motor linear, com padrão UL / ROHS / EN. Ruído abaixo de 50 dB, com movimento vitalício 20.000 vezes.

**RCP**

Alça de reinicialização de emergência de RCP para achatar imediatamente a parte traseira da cama; localizado em ambos os lados da cama. O botão de CPR elétrico está instalado dentro do painel de controle, um botão para tornar a placa traseira plana.

**Rodas**

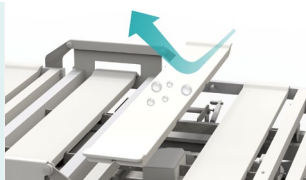
Rodas com pneu TPR, sem desgaste após rodar 30KM, unidas formando sem parafusos. Teste dinâmico do passe: Rolamento 120kg correr 30KM e passar obstáculos 500 vezes 500 vezes.

**Controlador de mão**

Controlador de mão, mantenha-se qualificado após o uso de 2.000 vezes.

**TECNOLOGIA LIVRE DE ARTICULAÇÃO**

Capas plásticas removíveis formadas a partir de 9 lamela moldada de sopro removível para minimizar as ranhuras onde infecções indesejadas podem se esconder.

**Indicador de ângulo**

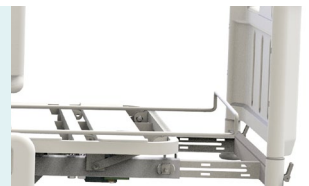
Indicador de ângulo de patente, mostrar claramente o encosto.

**Placa da cabeceira e dos pés**

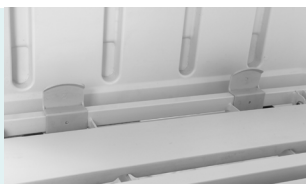
Design patenteado Cabeceira e rodapé, usando a estrutura de bloqueio excêntrica, um passo rápido removível.

**Extensão**

Plataforma da cama alargada até 20 CM, confortável para os pacientes mais altos (opção).

**Colchão**

Suporte de colchão em PP removível.

**Rodas de amortecedores**

Amortecedores de canto horizontais na periferia externa da cama para proteger a cama e a parede.

**Soporte para soro**

Coluna de aço inoxidável com plástico gancho.

**Gancho de drenagem**

Gancho de drenagem de plástico, móvel.





CONSTANTE
INOVAÇÃO



Desenho



Pesquisa



Fabricação



Manutenção



Serviço



FILIAIS EM
TODO MUNDO

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
📞 +86 18021231901 · 🕒 24/7
✉️ sales@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue