




SKB041-1

РУЧНЫЕ НОСИЛКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Регистрационный код: SKM-F


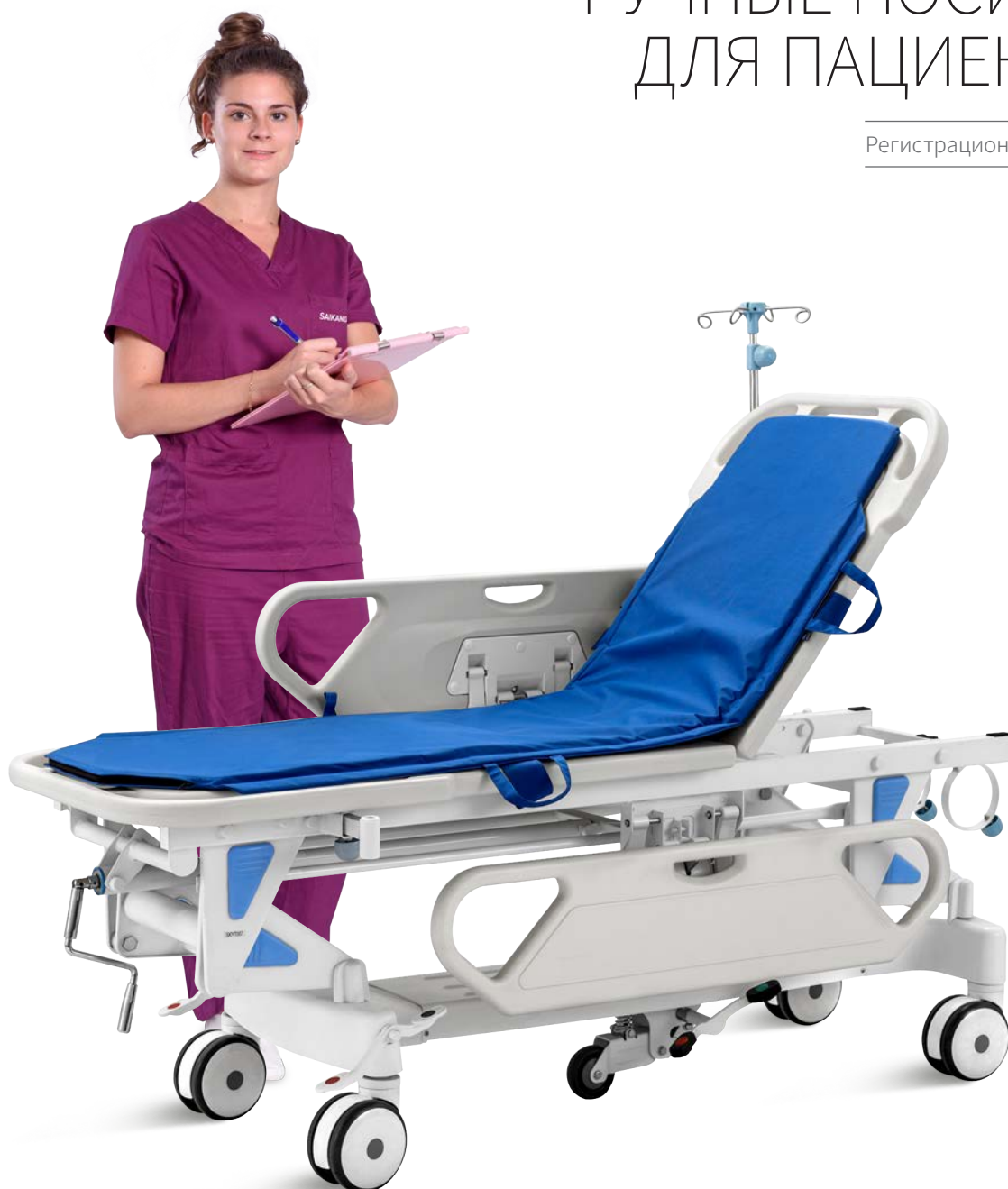


SAIKANG Medical

Healthier
your life

SKB041-1

ОСОБЕННОСТИ И ВЫДАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА

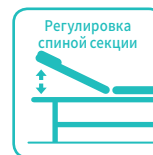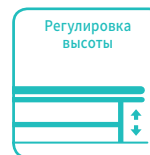

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАРАМЕТРА

▪ Внешний Размер (ДхШ):	1930x640 mm
▪ Регулировка высоты стола:	540-840 mm
▪ Регулировка спинной секции:	0-75° (±10°)

ТНХНИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

☒ Кривошпная система	1 компл
☒ Газлифт спинной секции	1 компл
☒ ABS Боковое ограждение	1 компл
☒ 6" Колеса с центральной тормозной системой	4 шт.
☒ Направленное колесо	1 шт.
☒ Центральная тормозная педаль	2 шт.
☒ Направленная педаль	2 шт.
☒ Трансфузионная стойка	1 компл
☒ Отверстие для вставки трансфузионной стойки	2 шт.
☒ Разрядная рамка для кислорода	1 шт.
☒ Трансферный матрас	1 шт.



Металлический материал

Баометаль из Фуртуны 500.
Панасоник Робот обеспечивает
полную плавную сварку на 360°.

**Несущий**

Прочная труба в весовой несущей
конструкции.

**Лакировать**

11 процессов покраски
эпоксидной, тестирование ASTM
антибактериальный, толщина
краски 0.12 мм.

**Защита**

Накройте все металлические винты
резиновым колпачком, защитите
винты от возможной коррозии.
Защита от металлической пыли
для кривошпной системы, более
прочной, чем пластиковая крышка.

**Пластик**

Экологический пластик можно
стерилизовать при температуре
100°, растяжение до 30 МПа.

**Спинной подъем**

Спинной подъем может быть
до 80°, что позволяет пациенту
чувствовать себя более
комфортно, когда это необходимо.

**Двухсторонние колеса**

Четыре Двухсторонние
колеса диаметром 6 дюймов,
одновременно запирающиеся
педалью шага с обеих сторон. ТПР
шин на усталость после работы
30 км, сохранения анти-обмотки
твердой оболочки, соединенные
формируя без болтов.

**Направленное центральное колесо**


Может быть задействован
для облегчения управления
направлением, позволяя
пользователям легко
перемещаться по носилкам в
беспокойных и динамичных
условиях.

**Телескопическая
Трансфузионная стойка**


Трансфузионная стойка из полной
нержавеющей стали, выдерживает
до 15 кг.

**Разрядная рамка для
кислорода**

Регулируемая вертикальная
разрядная рамка для кислорода.
Грузоподъемность: 15 кг.

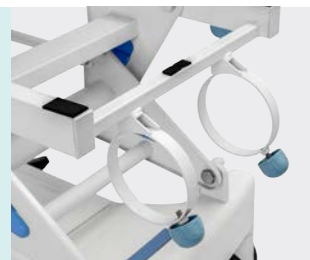**Ручка из нержавеющей стали**

Ручка из нержавеющей стали,
более прочная.

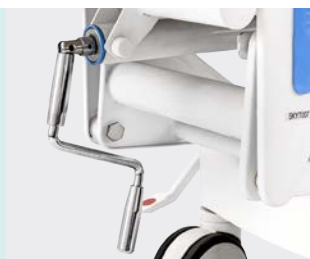**Матрас**

Водонепроницаемый матрас с
ремнями Толе.





ПЕРМАНЕНТНАЯ ИННОВАЦИЯ



Дизайн



Исследование



Производство



Ремонт



Обслуживание



ВСЕМИРНЫЕ ФИЛИАЛЫ

США

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Англия

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Россия

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

Восточная Африка

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Ближний Восток

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7
✉ sales@chinasaikang.com
🌐 www.saikangmedical.com



Видео компаний



каталог